



AquaSense®

Rend votre salle de bains plus sécuritaire



**Poignée d'appui
à profil bas
pour baignoire**

**Instructions
d'installation**

Modèle : 785-360

Installation

1. Avant d'installer votre poignée d'appui, assurez-vous que votre baignoire est sèche et propre. Localiser la partie la plus droite de la paroi de la baignoire. Éviter les parties courbées.
2. Faire ressortir le levier de réglage (A) en le tirant vers l'extérieur. Tourner le levier dans le sens anti-horaire afin d'ouvrir suffisamment le mécanisme de serrage (B) en vue de placer la poignée d'appui sur la paroi.
3. Placer la poignée d'appui sur la paroi de la baignoire de façon à ce que le levier de réglage soit tournée vers l'extérieur de la baignoire et le mécanisme de serrage vers l'intérieur.
4. Serrer en tournant le levier de réglage dans le sens horaire. Lorsque la poignée d'appui est fixée solidement, rabattre le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Assurez-vous que la poignée d'appui est fixée fermement en la poussant de tous côtés; vers l'avant, l'arrière et d'un côté à l'autre. Si elle bouge, la replacer à l'endroit désiré et resserrer.

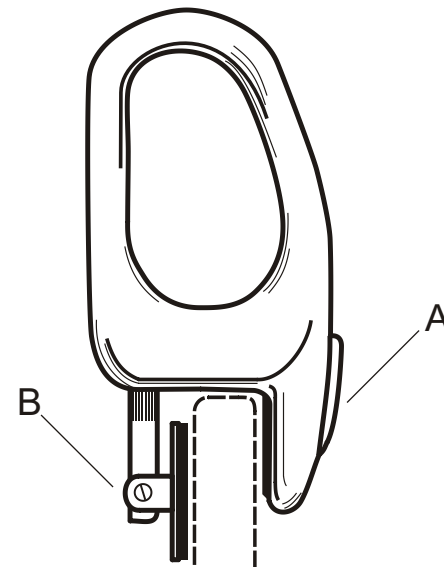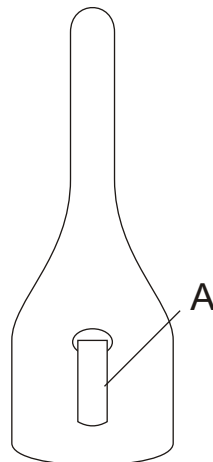

Important

La poignée d'appui peut nécessiter un resserrage périodique. Vérifier la solidité avant l'utilisation et resserrer au besoin.

Attention

Il est important de procéder délicatement lorsque la poignée d'appui est installée sur une baignoire en fibre de verre. Un ajustement trop serré du support pourrait faire craquer la baignoire.